


LT Solution

Life Sciences Total Care Solution

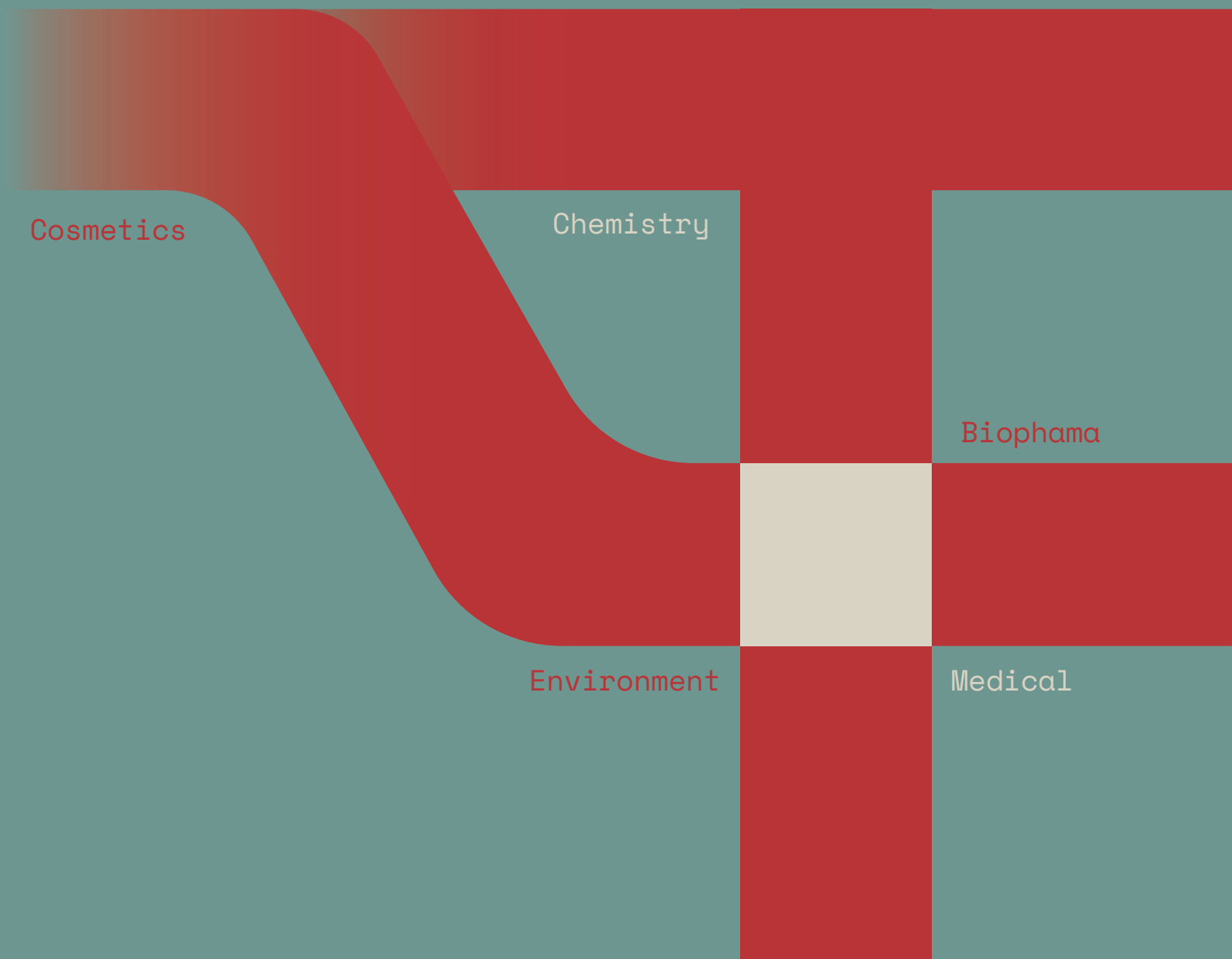

Cosmetics

Chemistry

Biopharma

Environment

Medical

Contents

01

회사 소개 4p

03

취급 제품 8p

연구 장비 및 기기 / 소모품 / 원료 및 시약 / 미생물 배지 /
인증표준물질 및 국제숙련도

05

검교정 서비스 40p

02

실험실 설계 6p

04

클린룸 제품 및 안전용품 37p

06

서비스 및 지원 41p

엘티솔루션은 생명과학 산업 토탈 케어 커머스입니다.



OUR PARTNERS 다양한 파트너와 협업을 통해 비전을 공유, 함께 성장


공공기관


바이오 및 제약회사


대학교


병원


그 외 연구기관

WHAT WE DO 다양한 사업영역을 통해 Total Solution 제공

- 1

PRODUCT
연구 장비, 의료기기, 시약, 케미칼, 소모품, 의약품 제조 원료, 안전 용품 등 사업 분야에 필요로 하는 여러 기자재를 수입 및 국내 인프라를 통해 합리적인 가격으로 제공합니다.
- 2

CONSULTING
연구소 실험 테이블부터 GMP 준하는 생산 장비 및 설비까지 연구목적에 기반으로 장비를 선정하고 효율적인 실험실 구축을 위하여 전기, 가스, 공조 등 통합 솔루션을 제공해 드립니다.
- 3

DELIVERY
적절한 방법을 통하여 최대한 빠른 배송으로 고객님의 프로젝트 일정에 문제가 생기지 않도록 서포트를 합니다.
- 4

WARRANTY
판매에서 끝이 아닌, 상품정보 및 구매 패턴분석을 통한 재고관리, 각종 문서 지원, 사후 관리 서비스를 제공합니다.

LT SOLUTION PRODUCT 주요 취급 브랜드













맞춤형 실험실 환경 구축을 위한 완벽한 솔루션

맞춤형 설계 고객의 실험 공간과 연구 요구에 맞춘 레이아웃 설계
고품질 가구 실험실 환경에 적합하고 내구성이 뛰어난 가구 제공
전문 설치 경험 많은 전문가가 직접 설치, 안전하고 효율적인 작업 환경 보장
A/S 지원 설치 후 유지보수 및 애프터서비스 지원

A. Lab table



Type	Steel / Aluminium	Size	중앙실험대	W1200 x D1500 x H800	(단위 : mm)
Option	Electric Socket LED Lamp		벽면실험대	W1200 x D750 x H800	
			코너실험대	W750 x D750 x H800	
			천평대	W1200 x D750 x H800	

B. Sink table



싱크 테이블

Type Steel / Aluminium
SUS
Option Standard Faucet
Di Water Faucet
Eye-Shower
Drying Rack

Type Duct / Filter

C. Hood



Fume hood



Arm hood

D. Reagent cabinet / cabinet



Reagent cabinet



Safety Cabinet



이동식 수납장



Steel cabinet



Storage cabinet

E. Others



실험실 의자



다용도 카트



비상 눈세척기



초자건조대



경량 랙



현장 요구사항에 맞게
구성 및 재질 변경하여
주문제작 가능 !

* GMP, CleanRoom SUS 제품 군 제작가능

Pipette

정확성과 신뢰성의 상징, 세계 1위 판매량
탁월한 디자인과 사용 편의성으로 연구 성과 극대화!



자동분주기

빠르고 정밀한 자동 피펫팅



Bioreactor

미생물 및 Cell Culture 실험에
적합한 Bioreactor 제어 시스템



CO2 Incubator

최적화된 성장 조건과 효율적인 오염 방지
중간크기 부터 대형까지!



Thermo Mixer

뛰어난 mixing 성능과 탁월한 온도
제어 기능 스마트믹서



PCR

다양한 핵산 증폭 요구사항을
완벽히 충족!



튜브

원심분리, mixing 등 다양한 실험에서
사용자의 워크플로우를 향상



원심분리기

소형 원심분리기부터 고속 원심분리기까지!



기초장비



30,000여 개의 제품을 보유!



30,000여 개의 제품을 보유한 종합공급 시스템
과 글로벌 협력체제를 통해, 국내외 시장에 우수한
종합유통서비스를 제공합니다.

초자 유리기구 및 실험 소모품



취급 제품

기초실험장비	유리기구
플라스틱기구	생명과학
안전/실험기구	교육기자재
분석/측정장비	공구/포장
실험소모품	사무/생활용품
헬스/의료용품	

Orion

pH/이온/전도도/용존산소/비색계/탁도계 등 다양한 수질측정기를 공급



수질 측정기

이온 전극 및 센서

pH 버퍼 용액

Finnpipette

정확하고 정밀한 피펫으로 일관되며 재현 가능한 결과를 도출



피펫

QSP

액체 이동 및 보관에 대한 다양한 제품과 고품질의 팁을 제공



Reload/ Rack / Filer / Sterile Tip

Tip

Thermo 기초 장비

연구자들이 더 안전하고 효율적인 실험이 가능하도록 연구 편의성을 제공



Co2 Incubator



시약 자동분주기



초저온 냉동고

마이크로플레이트 장비

마이크로플레이트 기반의 흡광, 형광, 발광을 측정할 수 있는 제품을 제공



스펙트로포토메터

마이크로플레이트 워셔

원심분리기

60년 이상 원심분리기를 연구, 개발



테이블탑 원심분리기

대용량 원심분리기

Nunc

높은 신뢰성의 Gibco 배지를 사용하여 검증



Cell Culture Plastics

크로마토그래피소모품

40년의 노하우가 담긴 실리카 제작 기술로 탄생



컬럼

GC 라이너

Gibco

배지, 보충제, 세포 및 세포 배양 시약



배지

Invitrogen

51,000개 이상의 광범위한 고품질 1차 및 2차 항체 제공



항체

비전과학의 제품군

원심분리기

고속 진공 원심분리기 / 고속 냉장 원심분리기 / 테이블탑 원심분리기
마이크로 원심분리기 / 복합기 / 대용량 원심분리기



배양기

배양기(상온, 저온) / 진탕배양기 / 특수목적 배양기



무균 작업대

BSC, 배기함



CO2

위터자켓 / 에어자켓 / 웨이커



냉장고

저온실험상 / 의약품정온기 / 시약 냉장고 / 혈액 냉장고




건조기

진공 건조기, 진공 건조기, 특수 건조기



혼합기

진탕기, 교반기, 혼합기

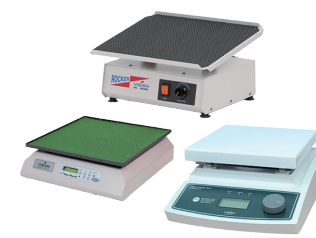

항온항습기

항온항습기, 열충격시험기



시험관항온기

시험관안의 재료를 건조할 때 사용



항온수조

항온수조, 순환항온수조, 진탕항온수조



냉동고

탁월한 냉동 능력으로 장기 동결 보존 가능



제빙기

플레이크 타입, 스노우 타입



생장상

일반, CO2, 고습도, 고조도



멸균기

고압 멸균기, 자동 멸균기



고압파쇄기

세포벽만을 효율적으로 파쇄





GRAM은 1910년 설립되어 오랜 명성과 함께 신뢰성 있는 고성능 냉장 서비스를 제공하는 덴마크 업체입니다. 주요 제품으로는 저온안정성시험용 및 시약, 표준품 보관용 냉장챔버 및 냉동챔버 등 있습니다.



- A.**

냉장	ER1270	냉동	RF1270
----	--------	----	--------

1270L 급 2도어 대용량 냉장고
- B.**

냉장	ER930	냉동	RF930
----	-------	----	-------

1000L 급 대용량 냉장고, 공간 절약형 모델
- C.**

냉장	ER660	냉동	RF660
----	-------	----	-------

700L 급 대용량 냉장고, 공간 절약형 모델
- D.**

냉장	ER610	냉동	RF610
----	-------	----	-------

600L 급 대용량 냉장고, 공간 절약형 모델
- E.**

냉장	ER410	냉동	RF410
----	-------	----	-------

400L 급 대용량 냉장고, 공간 절약형 모델
- F.**

냉장	ER310	냉동	RF310
----	-------	----	-------

220L 급 소형 냉장고, Bench-top 스타일
- G.**

냉장	ER210	냉동	RF210
----	-------	----	-------

130L 급 소형 냉장고, Bench-top 스타일
- GRAM 냉장고는 특별한 공기 순환 시스템을 통해 안정적인 온도를 유지!

GRAM 냉장고 특징

Validation
- IQ/OQ/PQ Validation & Documentation

GRAM MPC 4.6 컨트롤러

1 Access port 기본장착

이동이 편리한 Castors 기본장착

2 Door lock(Key 제공) 기본장착

Option
- 온도기록계 (Digital Type / Paper Type)

장착 및 탈착이 쉬운 선반

유럽방폭인증 ATEX compliance



CARON은 1985년 설립되어 오랜 명성과 함께 고성능 신뢰성 있는 안정성 시험 장비를 제공하는 미국 업체입니다. 주요 제품으로는 광안정성시험챔버 & 안정성시험챔버, CO2배양기, 배양기 등이 있습니다.

광안정성시험챔버



ICH guidelines Q1B 규정에 부합하는 챔버
최대광량 설정 시 광시험 총 42시간으로 가장 빠른 광시험완료가 가능한 챔버
7" Color 터치스크린 기본장착으로 쉬운 사용
확증시험, 강제분해시험, 냉장조건(+5°C)이 필요한 바이오의약품 광안정성시험 가능
광 노출시간 값 또는 광 노출량 값을 설정가능

Temperature Range	(5°C option~)10°C to 35°C	Work Space	311ℓ
Interior Dimensions	683×610×711mm	Electricity	208/230V, 60Hz, 10A
Exterior Dimensions	958×782×1161mm	Weight	210kg

안정성시험챔버



- | | |
|---|------------------------------|
| A | 7000-75-2 (2100L 급 3도어 대용량) |
| B | 7000-50-2 (1400L 급 2도어 대용량) |
| C | 7000-33-2 (1000L 급 Reach-in) |
| D | 7000-25-2 (700L 급 Reach-in) |
| E | 7000-10-2 (300L 급 Bench-top) |

	7000-75-2	7000-50-2	7000-33-2	7000-25-2	7000-10-2
Temperature Range	5°C to 70°C		5°C to 70°C		
Temperature Control	±0.2°C		±0.1°C		
Temperature Uniformity	±1.0°C		±0.3°C		
Temperature Sensor	3-wire RTD		3-wire RTD		
Humidity Range	20 to 95% RH		20 to 95% RH		
Humidity Control	±2%*		±2% RH*		
Humidity Sensor			Capacitive		
Interior Dimensions (cm)	202 × 72 × 150	130 × 72 × 150	81.3 × 68.6 × 166.9	81.3 × 68.6 × 133.9	58.4 × 65.5 × 75.7
Interior Construction	Type 304, Stainless Steel		Type 304, 2B Finish, Solid Stainless Steel		
Exterior Dimensions (cm)	217 × 89 × 207	145 × 89 × 207	90.2 × 84.6 × 228.9	90.2 × 84.6 × 195.8	112.3 × 82.8 × 92.7
Exterior Construction	Stainless Steel		Cold Rolled Steel, Powder Coated		
Work Space	75 cu. ft. (2,124 Liters)	50 cu. ft. (1,416 Liters)	33 cu. ft. (934 Liters)	25 cu. ft. (708 Liters)	10 cu. ft. (283 Liters)
# of Shelves	12	8	5	4	3
Shelf Construction	Type 304, Perforated Stainless Steel, Electropolished				
Shelf Dimensions (cm)	55 × 67		74.3 × 62.1	74.3 × 62.1	57.2 × 64.5
Electrical	208/230V, 60 Hz, 12A		208/230V, 60 Hz, 10A		208/230V, 60 Hz, 8A
Shipping Weight	1,125 lbs	800 lbs		775 lbs	495 lbs

초순수 시스템

Arium® Mini 초순수 시스템

Arium® Mini Arium® Mini Plus
Arium® Mini Essentia

일 10L 내외 초순수 정제에 적합한 컴팩트형(최대 폭 28cm로 공간 절약 가능), 실험용수 시스템.

Arium® Pro 초순수 시스템

Pro Pro DI Pro UV Pro UF
Pro VF

용도에 부합하는 모듈식 시스템으로 유연한 사용성과 일관적인 품질뿐만 아니라 까다로운 실험 수요를 충족하는 솔루션

실험실용 저울

저울 포트폴리오

Cubis® II Practum® Entris® II Secura® Quintix®
Cubis® 대용량 마이크로 저울

계량 필요에 맞는 실험실용 저울을 선택할 수 있으며, 높은 수준의 계량 속도와 신뢰성, 안전성을 제공



바이오 공정 솔루션

크로마토그래피 시스템

고객사에서 필요로 하는 다양한 공정에 즉시 활용할 수 있는 형태로, 여러 가지 형태의 크로마토그래피 시스템을 제공



- 다회용 배치 크로마토그래피
- 일회용 배치 크로마토그래피
- 강화된 연속식 크로마토그래피
- HPLC 크로마토그래피

바이오리액터

일회용 바이오리액터는 포유류 세포의 배양, 그리고 고밀도 세포 배양과 마이크로캐리어 배양에도 문제없이 대응



- Biostat STR® Gen. 3
- Biostat® RM & Flexsafe® RM
- Biostat® RM TX Bag,
- Flexsafe® RM TX Bag
- Univessel® SU
- Ambr® 15 세포배양기
- Ambr® 250 고수율 세포배양기
- Ambr® 250 고수율 관류배양기
- Ambr® 250 모듈러

특수 배지 시스템

바이러스 기반, 단백질 기반, 세포 기반 분야에서 사용되는 고품질 배지를 제공




실험실 필터

효율적이고 쉬운 여과 및 정제 프로세스를 보장



공정 여과

고객사의 공정 요건을 만족할 수 있는 다양한 완조립 일회용 여과 및 정제 솔루션을 제공

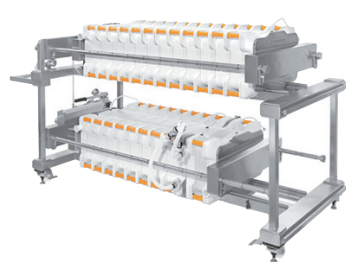

- 제균여과
- 바이러스 여과
- 접선호름여과
- 세포 수확
- 전처리 여과
- 세포배양배지 여과
- 공기 | 기체 여과

Cytiva는 고유의 단백질 정제 기술을 보유하고 있으며, 기초 연구에서부터 바이오 의약품 개발을 기반으로 Cytiva의 ÄKTA 액체 크로마토그래피 정제 시스템 및 컬럼/레진, CCD Imager, SPR 장비 및 Sensor chip, TFF 장비 및 필터, Single-use 세포 배양 시스템 및 cellbag을 포함한 다양한 제품 및 서비스를 제공합니다.

크로마토그래피 시스템 (ÄKTA™)

ÄKTA™ 단백질 정제 시스템은 단순 정제는 물론, 까다로운 물질 정제에 이르기까지 거의 모든 생체분자(Bio-molecule)에 대한 정제를 수행

주요제품 ÄKTA start ÄKTA go ÄKTA pure ÄKTA™ avant
ÄKTA pcc ÄKTA pilot™ 600 ÄKTAprocess ÄKTA ready



크로마토그래피 컬럼

ÄKTA™ 단백질 정제 시스템은 단순 정제는 물론, 까다로운 물질 정제에 이르기까지 거의 모든 생체분자(Bio-molecule)에 대한 정제를 수행



크로마토그래피 레진

단일클론항체(mAb), 항체 절편(fragment), 백신과 같은 생체 분자를 정제하는 데 사용되는 솔루션



TFF/CFF 필터 시스템

바이오 의약품 생산을 위한 다양한 TFF/CFF 필터 시스템을 제공



Molecular Imaging

분자생물학 연구, 바이오 의약품 생산, 다양한 정제 물질 이미징 및 정량 분석에 필요한 바이오 분자 이미지 분석 솔루션



Single-use 세포 배양 시스템 및 cellbag

Single-use bag을 사용하는 일회성 공정을 통해 교차 오염을 줄이고 세척 시간 감소, 문서 간소화를 통해 많이 사용되고 있는 장비



BIONEER만의 서비스

 Oligo (DNA/RNA) 고품질의 맞춤형 올리고뉴클레오타이드를 제공하여 다양한 연구와 진단에 활용	 NGS Sanger Sequencing과 달리 대량의 병렬 데이터 생산으로 유전체의 염기서열을 고속으로 분석하는 기술
 Sanger Sequencing Sanger method 기반 염기 서열 분석으로, 엄격한 QC기준으로 분석된 data를 report와 함께 제공	 CRISPR target DNA를 정확하게 인식하고 결합하는 guide RNA와 target DNA를 절단하는 Cas9 nuclease로 구성
 유전자/mRNA 합성 합성 생물학의 기반이 되는 gene synthesis service 부터 mRNA 합성을 비롯하여 protein의 합성까지 제공	 유전자 발현 분석 qPCR Array System은 다양한 pathway와 질병에 관련된 유전자들을 한 번에 screening이 가능하도록 제작
 단백질 합성 전자동단백질 합성 장비를 이용하여 다양한 종류의 단백질 (ex)효소, 성장인자, 호르몬 등 재조합 단백질 합성	 단클론 항체 제작 현재 항체 의약품 연구, 개발에 널리 사용되고 있는 Phage display 실험법을 이용하여 단클론 항체를 제작해 드리는 서비스
 DTC 유전자 검사 유전자 핵심 기술 및 최첨단 장비를 이용하여 DTC 유전자 검사 Gene2Life™ 서비스를 제공	 장비 개발 유전자 증폭 PCR, 실시간 데이터 분석을 위한 Real-Time PCR, 그리고 고순도, 고효율로 핵산추출을 수행할 수 있는 Prep 장비까지 최첨단 장비를 제공



단백질 분석(Protein Analysis)

단백질 정량 및 정제를 위한 다양한 전기영동 장비, 이차원 전기영동 시스템 등 제공



단백질 시약

단백질, 단백질 염색 등 단백질에 관련 된 시약을 제공



이미징 시스템(Imaging Systems)

젤 이미징, 블롯팅 시스템을 포함한 다양한 이미징 기기 제공



크로마토그래피(Chromatography)

단백질 정제 및 분석을 위한 다양한 크로마토그래피 시스템 및 컬럼



- Low-pressure Columns
- HPLC Columns
- Medium-Pressure Columns
- Gravity & Spin Columns

유전자 분석(Genomics & PCR)

PCR에 필요한 PCR 시약, 프라이머, 플라스틱 소모품, 실시간 PCR 시스템, 열 순환기를 제공



Waters의 소프트웨어와 기기는 사람들이 섭취하는 의약품의 안전, 우리가 섭취하는 식품과 음료의 순도, 매일 사용하는 품질의 내구성을 위해 노력하는 기업으로 액체 크로마토그래피, 질량분석기, 정밀 화학, 인포매틱스& 소프트웨어, 재료의 특성화 분석 등 선도적으로 솔루션을 제공하고 있습니다.

컬럼

용도에 적합한 Waters HPLC, UPLC, UHPLC, GPC, Nano/Micro, SFC, SEC 컬럼을 선택하고 분석법의 개발과 검증, 조직 간의 분석법 전환 등을 간소화하세요.

카테고리	UPLC 컬럼	UHPLC 컬럼	SEC 컬럼
SFC 컬럼	HPLC 컬럼	생물분리 컬럼	분취용 컬럼
GPC/APC 컬럼	Nano/Micro 컬럼		



컬럼 QR



크로마토그래피 시스템

Performance 라인의 UHPLC/UPLC 시스템, Dependability 라인의 HPLC 시스템, Flexibility 라인의 HPLC/UHPLC 시스템, Purification 시스템 및 Specialty 시스템을 비롯한 Waters 크로마토그래피 시스템으로 모든 응용 분야 요구사항을 충족합니다.

카테고리	Specialty 시스템	HPLC 시스템	정제 시스템
UHPLC/UPLC 시스템	HPLC/UHPLC 시스템		



크로마토그래피 QR



바이알, 플레이트, Insert, 인증 용기

Waters에서 가장 적합하고 신뢰할 수 있는 인증 바이알과 플레이트, Insert, 인증 용기를 선택하여 LC-UV, LC-MS, GC-MS 샘플 분석에 따른 위험과 비용을 간편하게 줄이는 동시에 일관성과 재현성을 높일 수 있습니다. 좋은 제품이 좋은 결과를 낳습니다.



바이알, 플레이트, insert, 인증 용기 QR

애질런트 테크놀로지스(Agilent Technologies)는 연구실 워크플로 전반을 위한 장치, 소프트웨어, 서비스, 소비재를 제공하는 미국의 생명과학 기업으로 전 세계에 약 18,000명의 직원으로 구성된 팀과 함께 전 세계 110개국의 고객에서 서비스를 제공하고 있습니다.

Agilent 주요 장비

Cell Imaging & Microscopy



Cytation C10 공초점 이미징 리더는 자동화된 공초점 및 광시야 현미경을 기존의 멀티모드 마이크로플레이트 리더와 결합한 제품



Cytation 7은 자흡광, variable bandwidth 형광, 발광 등 다기능 마이크로플레이트 리더의 기능을 기기한대로 구현한 고성능 장비

Flow Cytometry



NovoCyte Penton은 5개의 레이저를 갖춘 유세포 분석기로, 가장 까다로운 시료 패널 요건을 충족시키기 위해 최대 30개의 형광color를 분석할 수 있는 시스템

Microplate Reader



Logphase600은 미생물의 생장 곡선을 장시간 모니터링하기 위한 자동화 리더

Label Free Real Time Cell Analyzer



Boyden 챔버로 작동하는 CIM-Plate를 사용하여 실시간 세포 침습 및 이동 분석 수행

Microplate Washer & Dispenser



특허 받은 Dual-Action™ 방식을 통해 플레이트에 약하게 붙어있는 세포 상태를 유지하며 정확한 측정

Lab Automation



시료 전처리부터 검출까지 워크플로를 자동화

수요가 많은 컬럼 및 소모품

성공적인 분석을 위해서는 계측기에 맞는 올바른 소모품을 선택하는 것이 중요합니다. 애질런트 소모품은 모든 기기 성능을 최적화하고 뛰어난 과학적 결과를 보장하도록 설계되었습니다.

- GC 컬럼
- HPLC 컬럼
- GC 및 GC/MS 소모품
- LC 및 LC/MS 소모품
- 분광기 소모품
- 바이알 및 캡



Pump



L/S Precision Variable-Speed Pump Drive(07522-20)
유량형 튜브연동식 액체펌프

- Brushless 고효율
- 0.02 to 100 / 0.1 to 600
- 최대 2-4채널 펌프 헤드 장착
- 분주(volume, copy cycles, time)



L/S Precision Variable-Speed Pump Drive(07518-10)
기본형 튜브연동식 액체펌프

- 속도 조절 가능
- 1 to 100 / 3 to 300 / 6 to 600
- 최대 2-4채널 펌프 헤드 장착
- Contamination-free pumping



L/S Digital Console Process drive (77420-10)
분주형 튜브연동식 액체펌프

- 316 stainless steel housing
- IP66 and NEMA 4X rated
- 0.1 to 650 rpm
- 최대 2 채널 펌프 헤드 장착



L/S Digital Console Process drive (77975-25)
분주형 튜브연동식 액체펌프

- 유량 : 0.006 to 3400 ml/min
- IP66 and NEMA 4X rated
- 0.1 to 650 rpm
- 최대 2 채널 펌프 헤드 장착

Tubing



06509
Tygon E-Lab
무독성, 비노화, 비산화, 투명



06440
Tygon E-LFL
tygon 시리즈 중 가장 긴 수명



06418
Tygon E-Food
비습윤, 식품 특화, 투명



06475
Versilon 2001
내화학성 우수한 재질, 낮은 추출성



06404
Versilon A-60-N
비전도성, 산/알칼리 특화



06402
Tygon A-60-F
고압 사용, 산/알칼리 특화



06401
Fuel & Lubricant
윤활유 / 연료 특화, 반투명 노랑



96251
Gore STA-Pure
파티클이 있는 용액 특화



95687
Pharmed BPT
세포 및 조직 배양 특화, 무독성



06424
C-Flex
유기용매 특화, 우수한 인장강도



96410
Platinum-Cured Silicone
내열성 우수, 무취, 무독성



96400
Peroxide-Cured Silicone
내열성 우수, 압축 변형 적음



96412
Viton
강산 특화, 불투명 검정



06442
Chem-Durance
내약품성 및 압력 내구성 우수



96419
Puri-Flex
낮은 가스 투과성, 반투명



06435
PharmaPure
최대 60psi(4bar) 압력에서 긴 수명

L/S, I/P, B/T series 튜빙펌프에 사용 가능

- I/P Pump Tubing (I/P 26, 73, 82)
- I/P High-Performance Pump Tubing (I/P 70, 88, 89)

- B/T Pump Tubing (B/T 87, 91)
- L/S Pump Tubing (L/S 13, 14, 16, 25, 17, 18)
- L/S High-Performance Pump Tubing (L/S 15, 24, 35, 36)

ZetaView®

브라운 운동을 하거나 마이크로 전기영동에 의해 움직이는 개별 입자를 Camera로 직접 촬영하여 나노 입자의 크기, 제타 전위, 입자 개수를 분석하는 시스템입니다. 저농도 시료의 분석이 용이하며 분석 전 Auto-Alignment와 Auto-Focusing 등의 기능을 통해 사용자간 데이터 편차를 제거하여 정확하고 신뢰성 있는 분석이 가능합니다.

분석 범위

Size distribution	15nm ~ 1um
Zeta potential	20nm ~ 50um
pH range	2 ~ 12
Conductivity range	0 ~ 15mS/cm

제품 특징

- Compact하고 가벼워 설치 및 이동이 용이하고 Pump 세척이 가능하여 유지 보수 편리
- 직육면체 Sample Cell 내 11 position을 분석하고 소프트웨어가 각 position의 결과를 필터링하여 통계적으로 정확한 결과 도출
- Sample의 집 상태 모니터링에 의한 분석 오차 방지
- 나노 입자의 Size distribution, concentration, zeta potential 분석
- 1분당, 1000개 or 2000개 이상의 입자를 스캐닝

ZetaView® Model

PMX 130 MONO ZetaView®



Size, Concentration, Zeta Potential 분석

Fluorescence Filter 장착을 통한 형광 분석 가능

Pump를 이용한 Cell Cleaning 및 Sample Dosing 가능

405nm, 488nm, 520nm, 640nm 레이저 중 선택 가능



PMX 230 TWIN ZetaView®




2개의 Laser와 자동 Fluorescence Filter가 동시 장착되어 있으며 소프트웨어상 원클릭 교체가 가능하여 동일 샘플 내 2종의 형광 입자 분석 가능

Size, Concentration, Zeta Potential 분석

Pump를 이용한 Cell Cleaning 및 Sample Dosing 가능

PMX 430 QUATT ZetaView®

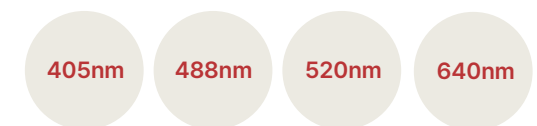

4개의 Laser와 자동 Fluorescence Filter가 동시 장착되어 있으며 소프트웨어상 원클릭 교체가 가능하여 동일 샘플 내 4종의 형광 입자 분석 가능


Size, Concentration, Zeta Potential 분석

Pump를 이용한 Cell Cleaning 및 Sample Dosing 가능



Axygen은 1993년에 창립되어 생물 연구에 필수적인 다양한 소모품 및 장비를 생산하며 세계인의 지속적인 사랑을 받고 있는 기업으로, Axygen은 유전체학 응용 분야를 위한 PCR 소모품, 튜브, 보관 플레이트, axyPrep 핵산 분리 키트 및 장치를 포함한 다양한 제품을 제공합니다.

Universal Tips

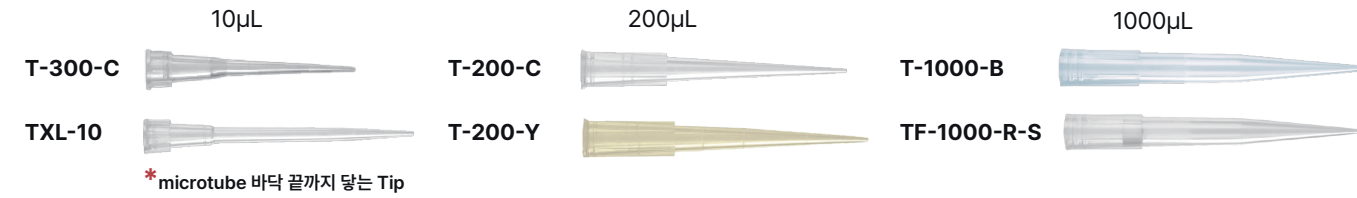


Filter Tips



GEN3 Multi-Barrier Filter Tips

제품	제품번호
10 µl	GEN3-10-L-R-S
20 µl	GEN3-20-L-R-S
200 µl	GEN3-200-L-R-S
1000 µl	GEN3-1000-L-R-S

- 독특한 3중 레이어 구조로 시약이 필터를 통과하지 않음
- Maymum recovery 기술로 피펫 내 잔여물 최소화
- 정밀성, 정확성 최대화

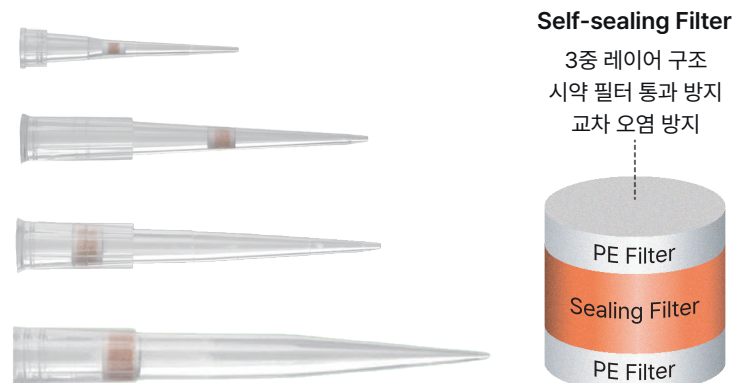

Micro Centrifuge Tube



제품번호	Volume	판매단위
MCT-150-C	1.5ml	1000개/PK
MCT-175-C	1.7ml	1000개/PK
MCT-200-C	2.0ml	500개/PK

PCR Tube



코닝은 소재과학 분야의 혁신을 선도하고 있으며, 플라스틱 용기, 특수 표면, 세포배양 미디어 및 세럼 등의 소모품과 첨단 세포 배양 연구, 바이오프로세싱, 유전체학, 신약 개발, 미생물학 및 화학용 일반 소모품 및 장비들을 제공하며, Corning®, Falcon®, Pyrex®, Axygen® 및 Gosselin 등과 같은 코닝 브랜드로 생명 공학 제품을 판매합니다.



CORNING® 소모품 및 일반 실험실 용품



Vaccum Filter Systems

재질: Polyethersulfone(PES), Cellulose Acetate(CA), Cellulose Nitrate(CN), Nylon(NY)

- 150 mL Capacity, 42 mm Square Membrane **PES**
- 250 mL Capacity, 49.5 mm Square Membrane **PES CA**
- 500 mL Capacity, 63 mm Square Membrane **PES CA**
- 1,000 mL Capacity, 79 mm Square Membrane **PES CA NY**



Bottle Top Vacuum Filters ▲



Storage Bottles

Funnel Size: 150 ~ 1000 mL

- Corning® Easy Grip Style Storage Bottles
- 150ml 250ml 500ml 1000ml**



Erlenmeyer Flasks

바닥 모양: Plain, Baffled / 용량 범위: 125 ml ~ 5L


- Corning® Plain Bottom Erlenmeyer Flask
- Plain 125ml 250ml 500ml 1,000ml 2,000ml 3,000ml 5,000ml**
- Corning® Baffled Bottom Erlenmeyer Flask
- Baffled 125ml 250ml 500ml 1,000ml 2,000ml 3,000ml 5,000ml**



Plain Bottom ▲



Baffled Bottom ▲

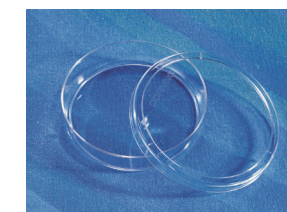


Culture Dish

표면 종류: Original Tissue Culture (TC-treated)
Cell BIND®,
Ultra-Low Attachment (ULA)

	Cat. No	Surface	Dish Style	Qty/Cs
	430165		35	500
	430166	TC	60	500
	430167		100	500
	430599		150	60

Multiple Well Plates

- 6 Well Plates
- 48 Well Plates
- 12 Well Plates
- 96 Well Cell Culture Clear Plates
- 24 Well Plates

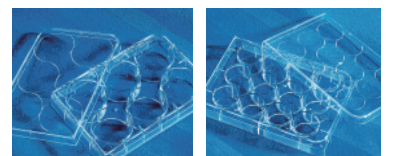


6 Well Plates ▲ 12 Well Plates ▲



Cryogenic Vials

Internal / External Thread Style 선택 가능

	Cat. No	Surface	Dish Style	Qty/Cs
Internal	430487	1.2	Conical Bottom	500
	430488	2	Round Bottom	500
External	430658	1.2	Conical Bottom	500
	430659	2	Round Bottom	500

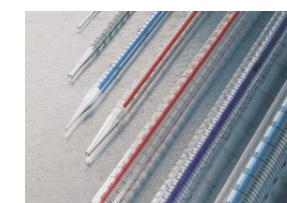


Stripette® Serological Pipets

규격 : 1, 2, 5, 10, 25, & 100 mL
Negative 눈금 표시

Cat. No	Capacity	Graduation	Color Coded Stripe
4485	1ml	1/100ml	Yellow
4486	2ml	1/100ml	Green
4487	5ml	1/10ml	Blue
4488	10ml	1/10ml	Orange


SPL은 플라스틱 소재의 실험실 소모품을 생산하는 선도적인 국산 제조/판매 업체로, 현재 400여종의 생명과학 연구용 제품을 생산하고 있습니다. 열정적인 전문가들로 구성된 팀이 지속적으로 연구, 개발 및 품질 관리에 노력을 기울이며, 엄격한 국제규격인 ISO 9001, ISO 13485, CE 인증을 취득하였습니다.

제품 목록 ▶ Cell Culture Molecular Analysis Microbiology Handling & Storage Plant & Insect Clinical Labware

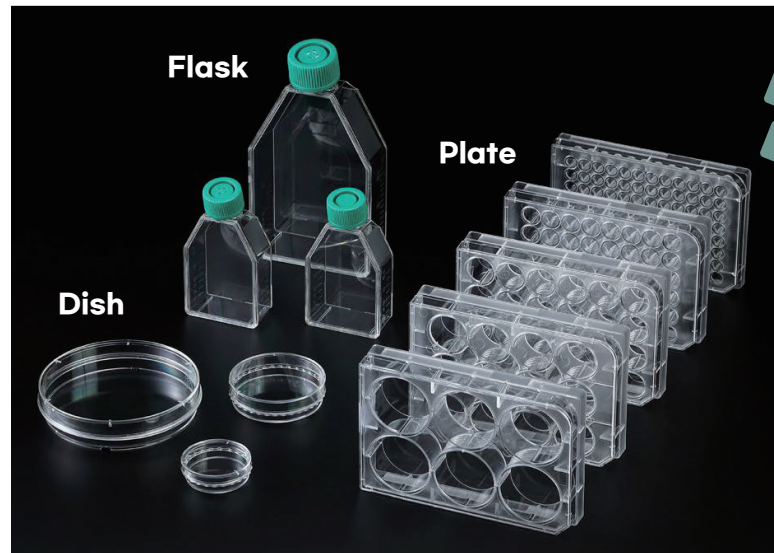


Type	Cat. No.	Working Vol. (ml)
Filter	75025	7.00
Plug	75125	7.00
Filter	75075	25.00
	21035	3.00
	21060	5.00
	21100	12.50
	39006	3.00
	39012	2.00
	39024	1.00
	39048	0.50
	39096	0.20

Type	Cat. No.	Working Vol. (ml)	Packaging
	22001	100.00	1 / 50
	23001	100.00	20 / 100
	22050	50.00	1 / 50
	23050	50.00	5 / 100
	21002	25.00	1 / 50
	21102	25.00	5 / 100
	21008	7.00	1 / 100
	21012	4.00	1 / 100

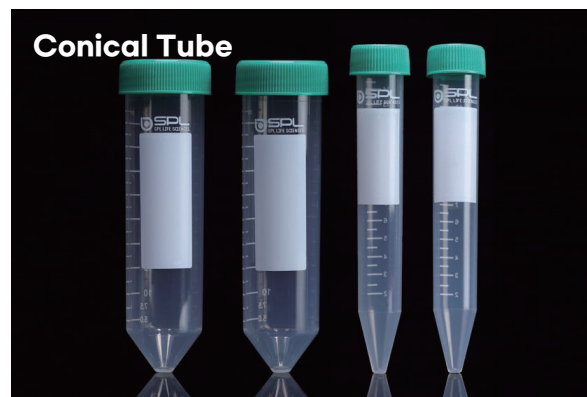

Type	Cat. No.	Total Vol. (ml)	RCF Rating
	50015	15.00	13,000 x g
	51015	15.00	3,000 x g
	50050	50.00	14,000 x g
	50515	15.00	-
	50250	50.00	-

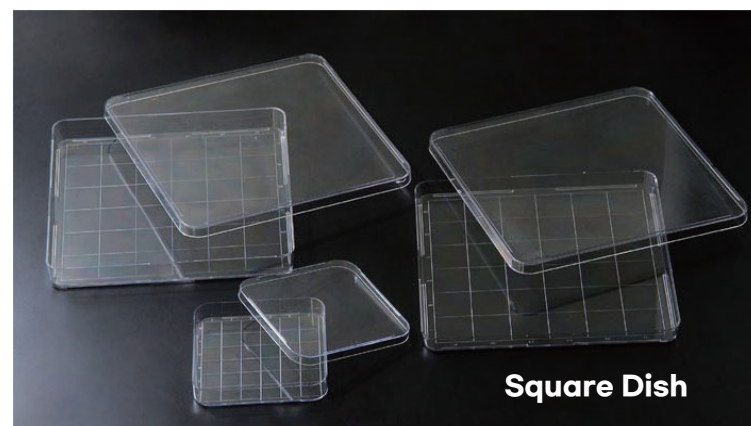

Type	Cat. No.	External Dimensions(mm)	Packaging
	11125	126.40 x 126.40 x 20.00	10 / 240
	10245	243.00 x 243.00 x 19.30	5 / 20
	11245	243.00 x 243.00 x 27.30	5 / 20

VWR는 바이오, 화학, 의료, 첨단 기술 분야의 600만개 이상의 제품을 취급합니다. 의약품 제조 원료로 사용되는 화학물질과 생명과학 및 첨단소재 연구 분야에 필요한 모든 장비, 소모품, 시약 등을 공급하고 있습니다.

VWR 제품



CELL CHAMBER, STERILE

VWR 셀 챔버는 의료용 GPPS(범용 폴리스티렌)로 제작되고 통풍 캡이 있어 대규모 세포 배양에 적합합니다.

- 쉬운 스케일 업을 위해 1-, 2-, 5- 및 10- 트레이 버전으로 사용 가능
- 최적의 세포 부착 및 성장을 위한 표면 처리
- 소수성 멤브레인 (구멍 크기 0.22 µm)은 가스 교환 중 잠재적인 오염을 방지
- 사이토카인 및 성장인자를 흡수하지 않으며, 기존의 트립신 다이제이션 방법에 의한 세포 수확 가능
- 방사선 조사에 의해 멸균됨
- DNase/RNase Free, 비발연성



BOTTLE-TOP VACUUM FILTRATION SYSTEMS, PES

PS 깔때기 및 컬렉션 리저버. 세포 배양 배지, 완충액 또는 기타 생물학적 유체를 포함한 수용액의 진공 여과용 시스템

- 제품 별 lot 번호로 추적성 용이
- 여과가 완료되면, 필요할 때까지 용액을 컬렉션 리저버에 저장합니다.
- 비발연성, 비세포독성
- PES 멤브레인: 낮은 단백질 결합 및 낮은 추출물. 조직 배양 용도에 이상적입니다.
- 0.22 µm 멸균 적용 및 배지 준비에 적합합니다.



VWR ERLENMEYER SHAKER FLASK

VWR PC 삼각 шей커 플라스크는 탁월한 광학적 선명도와 기계적 강도를 제공합니다. шей커 배양 분야 및 보관에 적합합니다.

- 온도 범위: -80~ +121 °C
- 유리 및 달리 플라스크는 떨어져도 깨지지 않습니다.
- 정확도를 위한 물딩 눈금
- 멸균을 보장하고 누출을 방지하면서 지속적인 가스 교환을 위한 통풍 캡 옵션
- 비세포독성, DNase/RNase 없음, 비발연성
- 방사선 조사 SAL10-6(ISO11137)로 멸균



VWR PREMIUM LINE, SEROLOGICAL PIPETTES

투명한 PS 재질, 표면에 선명한 눈금 프린팅, 비멸균/멸균 선택 가능. USP Class VI에 따라 GPPS(general polystyrene)으로 만들어졌습니다

- DNase, RNase free, 비발연성, 세포무독성, 비용혈성
- BST/TSE 충족; latex free
- ±2%내의 정확한 분주를 위해 눈금이 교정됨
- 부피에 따라 색상으로 구분됨
- 멸균 피펫 : 감마선 조사로 멸균 처리됨



VWR 시린지 필터

일반적으로 정화, 멸균 여과, 시료 준비 및 멸균 환기에 사용됩니다.

- 멸균 블리스터 포장된 필터는 멸균 여과에 적합합니다.
- 비멸균 시린지 필터는 HPLC 응용 분야에 탁월합니다.
- Class VI 플라스틱 테스트에 따른 Biosafe
- Nylon, PES, PTFE, PVDF, CA, RC 멤브레인 및 GF (Glass fiber) 사용가능
- 친수성 또는 소수성 PTFE으로 제공
- 각 필터에는 female Luer-lock inlet 및 male slip Luer outlet이 있습니다.

주요 특징

다양한 제품군

생명과학 연구, 제약 개발, 화학 합성 및 분석 등에 필요한 광범위한 제품을 보유하고 있습니다.

글로벌 네트워크

전 세계적으로 연구소와 산업체에 제품과 서비스를 제공하며, 전 세계 60여 개국에 지사를 두고 있습니다.

혁신과 품질

지속적인 연구개발을 통해 고품질의 혁신적인 제품을 제공하여 과학적 발견과 발전을 지원 합니다.

대표 제품 및 서비스



Lab & Production materials

Preparation, Separation, Filtration & Monitoring Products

의약품 제조원료 및 연구용 시약



의약품 제조원료 화학물질 및 연구용 시약



용매

펜타이드 및 대용량유기 합성

실험실 장비의 세척

무기물 시약

바이오제약 솔루션



세포 배양 솔루션

바이오 공정 및 제제 원료

API 및 Folate 포트폴리오

제제 솔루션

분석 기기



HPLC 칼럼 및 액세서리

GC 칼럼, 액세서리 및 흡착제

크로마토그래피 표준물질

분석용 시약

Millipore Filtration Products



Filter Membranes

Millex® Syringe Filters

Vacuum Driven

Pressure Driven

역사

머크(Merck)

1668년에 설립된 독일 다름슈타트에 본사를 둔 머크 그룹은 세계에서 가장 오래된 제약 및 화학 회사 중 하나입니다.

씨그마알드리치(Sigma-Aldrich)

1975년에 설립된 씨그마와 1935년에 설립된 알드리치가 합병된 회사로, 생명과학 연구 및 화학 분야에서 중요한 역할을 했습니다.

대정화학, 덕산약품, 삼전순약, J.T Baker는 모두 고품질 화학 시약과 연구용 재료를 제공하는 주요 공급업체들입니다. 해당 모든 기업은 연구실, 제약, 생명과학 등 다양한 산업 분야에서 필수적인 화학 제품을 제공하고 있습니다.

대정화학

시약산업, 원료의약품 사업, 전자소재 사업, 동물약품 사업, 식품첨가물 사업 등 사업 영역을 펼치고, 주요 제품으로는 일반시약, hplc용 용매, 원료의약품 있습니다.



덕산약품

Analytical Reagents(분석시약), Organic Reagents(합성시약), high Purity Solvents(고순도 용매), Bio Reagents(바이오시약)에 해당하는 3000여종의 품목이 학교, 병원, 연구소 등의 실험 및 연구에 사용되고 있습니다.



Analytical Reagents (분석시약)

- Special Purpose reagents**
 - Volunetric analysis
 - Buffer solution
 - Indicator solution for Titration
 - Anhydrous Titration
 - Karl-Fischer
- Quality grades**
 - Guaranteed reagents (GR)
 - 시약 Extra Pure
 - 시약 Chemical Pure (CP)

J.T Baker

고순도 용매 및 시약은 필요한 성능을 제공하고, 정확도에 영향을 끼칠 수 있는 오염 물질의 위험을 최소화하는 동시에 주요 응용 분야에서 기기 감도와 감지 능력을 최대 화합니다. 고순도 산(acid)은 항상 (매우 낮은 ppt 레벨에서 미량 금속을 검출하는 경우에도) 고객의 니즈를 충족시킵니다.

고순도 용매 및 시약*



고순도 산*



고순도 용매 및 시약

J.T Baker LC/MS solvents, solvent blends and acids
J.T Baker HPLC solvents and reagents
J.T Baker Solvents and Reagents for Gas Chromatography

고순도 산

J.T Baker ULTREX II Ultrapure Acids
J.T Baker Baker INTRA-ANALYZED Acids
J.T Baker BAKER ANALYZED ACS Reagent Acids
Macron Fine Chemicals™ brand acids

화학물질 및 시약

 **6**
Chemical Brands

 **150,000**
Product

Organic and Inorganic Chemistry

완벽한 화학물질, 금속 및 소재

유기 및 무기 시약 금속 및 재료, 귀금속 화합물 및 촉매

빌딩 블록



Analytical Chemistry

크로마토그래피용 제품. 기초분석, 일반분석 및 연구실 업무

Acids and bases Dry reagents, salts, acids, solutions

Buffer and reagents High-purity solvents



Life Science

다양한 생명 과학을 위해 설계된 고순도 시약

분자 생물학 단백질 화학 세포 생물학




Screening Libraries

신약 발견에 맞춘 화학 제품 및 서비스 및 생명공학 부문

Screening collections and fragment libraries

Hit-to-lead Building blocks

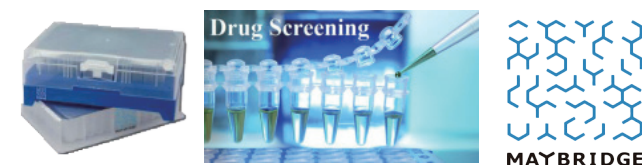

시약 등급

ACS	American Chemical Society (미국 화학회 규격)	FCC	Food Chemical Codex 식재료에 대한 공인된 규격
USP	United States Pharmacopoeia (미국약전)	BP	British Pharmacopoeia (영국약전)
NF	미국의 National Formulary에서 규정하는 규격	EP	European pharmacopoeia (유럽 약전)
JP	Japanese Pharmacopoeia의 약자로서 일본 약전	KP	Korea Pharmacopoeia (한국약전)
BIO	생화학용 Biochemical grade	HPLC	고성능 액체 크로마토그래피 분석을 위한 시약

Roche는 125년의 역사를 가진 세계 최대의 생명과학 기업으로, 암 치료 및 진단, 면역학적 질병 등 다양한 의료 분야에서 제품을 생산하는 글로벌 헬스케어 기업 중 하나입니다. 바이오 의약품 및 진단 장비를 첨단 기술로 개발하여 의료 혁신을 선도하는 데 기여하고 있습니다.



로슈 생화학 시약 제품군

Roche의 완전한 생화학 시약 포트폴리오 뿐만 아니라 광범위한 qPCR 및 핵산 정제 제품을 독점적으로 제공합니다. 협력적 혁신 정신을 통해 당사와 Roche의 파트너십은 양 사의 풍부한 유산과 지속적인 제품 품질 우수성을 향한 원동력으로 원활한 경험과 세계적 수준의첨단 분자 도구제품군을 제공하고자 합니다.

카테고리	유전체 연구	DNA 표지 및 검출, 제한 효소, 클로닝 키트 제품, 일반 PCR 관련 시약
	세포 분석	Tissue Dissociation, Transfection 시약 및 Functional Cell Assays 관련 제품
	프로테오믹스	Protease/Phosphatase Inhibitors, Substrates, 항체, 단백질 검출 및 정제 시약



유전체 연구 PCR qPCR RT-PCR / RT-qPCR DIG-Labeling



FastStart™ Taq DNAPolymerase



KAPA2G Fast HotStart ReadyMix



Titan™ One-Tube RT-PCR System



Expand™ High Fidelity PCR System



Transcriptor Universal cDNA Master



First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-PCR (AMV)

프로테오믹스 Protein Stabilization



cComplete™
Protease Inhibitor Cocktail



PhosSTOP™
Phosphatase Inhibitor Cocktail



X-tremeGENE™
360 Transfection Reagent



Liberase™
Research Grade Enzymes

Charles River QC 미생물 종합 솔루션


QC 업무는 복잡하며, 분석 결과의 확신 없이는 효율적으로 수행하기 어렵습니다. 타이트한 일정, 규제 요구사항, 엄격한 데이터 완전성 기준 등으로 인해 제품 안전과 환자의 생명에 집중하기 어렵습니다. 신뢰할 수 있고 효율적인 미생물 시험 솔루션을 선택해보세요.

■ 찰스리버의 Microbial Solutions 포트폴리오는 다음과 같은 구성으로 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다

Endosafe® 엔도톡신 테스트 **Celsis® 신속 미생물 검출** **Accugenix® 미생물 동정 서비스** ➔ 미생물 데이터 완전성 보장, 환자의 위험 최소화

■ **FDA 승인 LAL 시약.** 가장 빠른 LAL 시험은 무효한 결과로 인한 재시험입니다. 찰스리버의 LAL 시약은 다음과 같은 장점을 제공합니다

민감한 감도와 높은 직선성 **우수한 간섭 극복 능력** **FDA 승인** ➔ **정확한 결과를 제공, 무효한 결과와 재시험을 최소화**

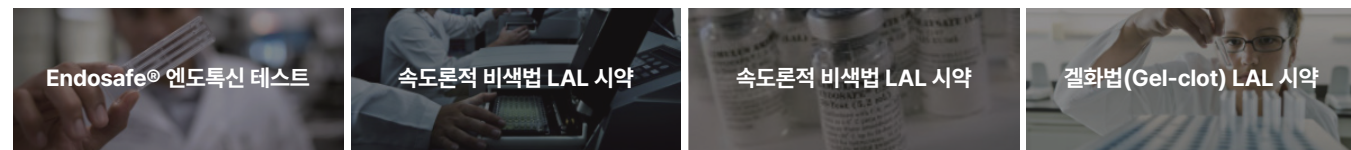

엔도톡신 시험에는 시약 외에도 LAL 약제서리가 필요합니다. 엔도톡신 시험에 사용할 약제서리를 선택하는 일은 매우 중요한데, 이는 오류와 시험 간섭이 없는 데이터를 얻도록 하기 때문입니다.

겔화법(Gel-clot) LAL 시약

Product	Sensitivity EU/mL	Code
50-test vial (5.2 mL)	0.015	R15015
	0.03	R15003
	0.06	R15006
	0.125	R11012
	0.25	R11025

속도론적 비색법 LAL 시약

Product	Sensitivity EU/mL	Code
Endochrome-K™ Kinetic Chromogenic LAL, 3.2 ml	Case of 10	R17100

속도론적 비탁법 LAL 시약

KTA	Sensitivity	Code
50-Test Vial (5.2 mL)	0.015 EU/mL	R15015
	0.03 EU/mL	R15003
	0.06 EU/mL	R15006

KTA2	Product	Packaging	Code
	Kinetic Turbidimetric LAL, 5.2ml	Case of 12	R19000

LAL시험 약제서리 제품

Control Standard Endotoxin (CSE) E. coli and Reference Standard Endotoxin (RSE)

Product	Packaging	Code
CSE – 10 ng per vial	1vial	E120
Positive control (for single test)†	Pack of 25	PC100
RSE (Reference standard endotoxin)	1vial	E150

LAL Reagent Water (in plastic bottle)

Product	Packaging	Code
30 mL bottle (< 0.001 EU/mL)	Case of 12	W130
50 mL bottle (< 0.001 EU/mL)	Case of 12	W120
100 mL bottle (< 0.001 EU/mL)	Case of 12	W110
500 mL bottle (< 0.001 EU/mL)	Pack of 6	W150

LAL Buffers

Product	Packaging	Code
30 mL bio-dispersing agent	Case of 12	BD100

Reaction Tubes

Product	Packaging	Code
10 × 75 mm flint glass tubes, in foil	Pack of 50	T200
13 × 100 mm borosilicate glass tubes, in foil	Pack of 50	T300
10 × 75 mm borosilicate glass tubes, in foil	Pack of 50	T400

96-Well Endosafe® Plates

Product	Code
96-well polystyrene plate (certified to 0.005 EU/mL)	M9005



QR을 통해 더 많은 제품을 확인해 보세요!

두 회사는 고체상 추출(SPE), QuEChERS 및 여과를 위한 제품을 개발하고 제조합니다. 제품 범위는 표준 및 맞춤형 SPE 카트리지, 모든 유형의 QuEChERS 키트, 주사기 필터 및 유기오염 물질 잔류물 분석을 위한 유리 섬유 프리팅으로 구성되어 있으며, 국제 고객의 표준과 요구를 뛰어넘는 프리미엄 범위의 샘플 준비 제품을 제공합니다.

CHROMATIFIC

Extraction KITS (추출)

날림이 적은 Granular type 의 추출 KIT 제공
사용이 편리한 Snap tube 제공 가능/ Method에 따른 추출 KIT 제공

Original	제품번호	함량 및 특이사항
	OMK1-SC	4g MgSO4; 1g NaCl
	OMK1-KB	4g MgSO4; 1g NaCl Granular, in screw tube
	OMK1-MP	4g MgSO4; 1g NaCl Granular, in anhydrous pack
	OMK1-50	4g MgSO4; 1g NaCl Granular, in 50mL Centrifuge tube
EN	ENK1-SC	4g MgSO4; 1g NaCl; 1g Na3Citrate; 0.5g Na2HCitrate
	ENK1-KB	4g MgSO4; 1g NaCl; 1g Na3Citrate; 0.5g Na2HCitrate
	ENK1-MP	4g MgSO4; 1g NaCl; 1g Na3Citrate; 0.5g Na2HCitrate
	ENK1-50	4g MgSO4; 1g NaCl; 1g Na3Citrate; 0.5g Na2HCitrate
AOAC	ACK1-SC	6g MgSO4; 1.5g NaAcetate Granular, in snap tube
	ACK1-KB	6g MgSO4; 1.5g NaAcetate Granular, in screw tube
	ACK1-MP	6g MgSO4; 1.5g NaAcetate Granular, in anhydrous pack
	ACK1-50	6g MgSO4; 1.5g NaAcetate Granular, in 50mL Centrifuge tube

Extraction KITS (추출 약제사리)

몽쳐져 있는 Salt를 효과적을 제거하여, 높은 회수율 제공
다양한 centrifuge tube 용량에 맞춰 3가지 type 제공

Method	제품번호
002-CH	Ceramic homogenizers for 2mL tubes
015-CH	Ceramic homogenizers for 15mL tubes
050-CH	Ceramic homogenizers for 50mL tubes

Extraction KITS (정제)

2mL 또는 15mL Centrifuge tube 사용 권장
2mL tube와 Method에 따른 정제 KIT 제공

Method	제품번호	구성성분
축산물	150CT-100	(Custom) 50mL - 1g C18
수산물	50PC25	(Custom) 50mL - 250mg PSA + 250mg C18



BEKOLUT

Extraction KITS (추출)


제품번호	함량 및 특이사항	Cat no
SALT-Kit-AC	(Original) 4g MgSO4, 1g NaCl, granular, in screw tube	SK-AC-050, OMK1-SC
Citrate-Kit-01	4g MgSO4; 1g NaCl; 1g NaCitrate; 0.5g disodium citrate sesquihydrate	EN-01-050, ENK1-SC
SALT-Kit-AC2	(AOAC) 6g MgSO4, 1.5g NaAcetate, granular, in screw tube	SK-AC2-050, ACK1-SC
SALT-Kit-AC3	(Original) 6g MgSO4; 1.5 g NaCl, granular type, in screw tube	SK-AC3-050

Extraction KITS (정제)

제품번호	함량 및 특이사항	Cat no
General fruits & Vegetables - 1	25mg PSA, 150 mg MgSO4, 2ml	PSA-KIT-01, PM1EN
General fruits & Vegetables - 2	150mg PSA, 900 mg MgSO4, 15ml	PSA-KIT-02, PM2EN
Fatty Samples - 1	25mg PSA, 25mg C18, 150mg MgSO4, 2ml	PSA-KIT-03, PM3EN
Fatty Samples - 2	150mg PSA, 150mg C18, 900mg MgSO4, 15ml	PSA-KIT-04, PM4EN



BEKOLUT® SPE Process ----->

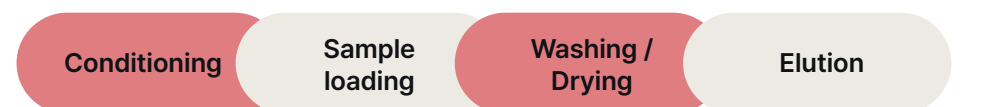

기초배지

RPMI1640
DMEM(L)
DMEM(H)
MEM
MEM-alpha(+)
MEM-alpha(-)
Grace's insect
DMEM/F12
MCDB131
Ham's F-10
Ham's F-12
M199
DPBS
Ultra Pure Water



무혈청배지

BIMV-Ve
BIM-CHO
BIM-INA (SFM)
BIM-INB (CD)
BIML-0
BIML-NK
BIMN-Ex
BIMN-Ac
BIM-HIDO
BIML-T
BIML-281
BIML-2810
BIML-1000
BIM-MSc
sXF
BIM-DF(+)
BIM-DF(-)



Cyokine & Antibody

Recombinant human IL-2
Recombinant human IL-12
Recombinant human IL-15
Recombinant human IL-18
Recombinant human IL-21
CD3
CD340



미생물 배지

TSA
TSA - Rodac
SDAC
SDAC-Rodac
FTM
TSB



Culture / Storage / Cryo bag

350mL Culture Bag
1L Culture Bag
500mL Storage Bag
1L Storage Bag
2L Culture Bag
5L Culture Bag
10L Culture Bag
20L Storage Bag
50L Storage Bag
CryoBag
CryoBag Case



CMO

Lot : 50L~200L (월 2400~3000L 생산가능)
용기: PET Bottle, Culture Bag
별도 맞춤 용기 + 특정 성분 첨가 / 제거된 배지

Endotoxin

배양 과정에서 발생할 수 있는 내독소 분석시험 서비스 제공.
당사만의 노하우로 단기간에 Endotoxin 검사 결과 확인 가능

Fetal Bovine Serum

CAT.NO
BR-FBU-11713-500

100%
U.S Origin Serum



Product Features

- 원산지 및 생산 국가 : 미국
- 품질을 결정하는 조건 및 성분 분석 관련하여 57개 테스트 완료
- 생화학적 분석에는 테트라사이클린 항생제에 대한 테스트 완료
- 성능 분석에는 복제, 성장, 대사 분석에 관한 테스트 완료
- 바이러스 분석에는 감염성 소 비기관염(IBR)와 파라인플루엔자3(PI3) 테스트 완료

Quality management system

- 동물공급업체 USDA허가 도축장 원재료 정보 추적이 가능
- Endotoxin < 1EU/ml, Hemoglobin < 20mg/DL
- Triple 0.1 μm membrane filter
- 고객사 요청에 따라 추가 제품 처리 가능(열 비활성화 및 감마선조사)

BD는 세계 최대 글로벌 의료 기술 기업 중 하나이며 의학적 발견, 진단 및 치료를 개선하고, 환자를 위한 임상 치료와 의료 서비스 제공자를 위한 임상 프로세스를 개발합니다. 아홉 개의 유통 센터와 수동 마이크로 제품 전용 제조 시설 여덟 곳을 갖추고 있어 지속적인 공급과 여분 제조가 가능하여 의료의 최전선에 있는 응용들을 지원하고 있습니다.

BD Difco

더 많은 정보를 원하시면 QR을 통해서 BD Difco 배지 제품 페이지를 참고하세요



미생물 배양 배지	선택적 및 차별적 배지	발효 배지	식품 안전 검사용 배지		
검사항목	Cat. No	공전상배지명		배지명	규격
일반 세균	247940	표준한천배지		Plate count ager	500g
	211835	유당(부이온)배지		Lactose broth	
	274000	BGLB 배지		BGLB(Brilliant Green Bile 2%)	
대장균/균	211199	Endo 한천배지		Endo agar	
	211215	EMB 한천배지		EMB agar	
	213000	보통한천배지		Nutrient agar	
	242010	데스옥시콜레이트 유당한천배지		Deoxycholate lactose agar	
진균수	213400	포테이토덱스트로스 한천배지		Potato Dextrose Ager	
	218105	Peptone Water		Bufferd Peptone Water	
살모넬라	218681	RVS broth(2차 중균)		Rappaport-Vassiliadis R10 broth	
	278850	XLD 한천배지(분리)		XLD ager	
	227410	DesoxycholateCitrate 한천배지		Desoxycholate Citrate ager	
	212123	MacConkey 한천배지		MacConkey ager	
	226540	TSI 사면배지		Triple Suger Iron ager	
	E.coli O157:H7	231430	mEC 배지		
279100		MacConkey Sorbitol 한천배지		MacConkey Sorbitol ager	
222220		Listeria Enrichment Broth		Listeria Enrichment Broth	
리스테리아	211767	Fraser Listeria Broth		Fraser broht	
	222530	Oxford Ager		Oxford ager	
	222120	LPM 한천배지		LPM ager	
	263620	Palcam ager		Palcam ager	
	236950	Tryptic Soy Ager		Tryptic soy ager	
	황색포도상구균	211825	TSB 배지		
276840		Baird Parker ager		Baird Parker ager	
바실러스 세레우스	211544	인산완충액		Phosphate Buffer, pH 7.2	
	281010	MYP 한천배지		MYP Ager	
장염비브리오	218071	펩톤수		Peptone Water	
	265020	TCBS 한천배지		TCBS Ager	
클로스트리디움	225650	치오글리콜린산염 배지		Fluid Thioglycollate Medium	
	264120	난황첨가 CW한천배지		Differential Reinforced Clostridial Ager	
	213000	보통한천배지		Nutrient Ager	
캠필로박터 제주니	214892	HUNT 배지		Campylobacter Ager Base	
	299614	modified Campy Blood Free 한천배지		BBL Campy CVA Ager	20Plates

Accustandard는 유기, 무기, 석유화학 분야의 화학물질 분석에 필요한 12,000개 이상의 인증표준물질과, 고객 요구에 맞게 제작되는 30,000개 이상의 custom 제품을 제공하며, ISO 17034, 17025, 9001 인증을 받아 제품의 전반적인 품질을 지속적으로 개선 하며 노력하고 있습니다.




Inorganic(무기)

Ion Chromatography (IC)
Wet Chemical Line
AA
ICP
ICP/MS
EPA Methods
Wear Metals & ASTM Method
Custom Formulations



Organic(유기)

POPs (잔류성 유기오염 물질)
*PCBs, PBDEs / PBBs, PAHs, Pesticides & Herbicides
VOCs (휘발성유기화합물)
*Aldehydes 외 작용기 별 그룹
Plastic Additives (플라스틱 가소제)
Food analyts / Allergens
Dyes / Odor / EPA Method

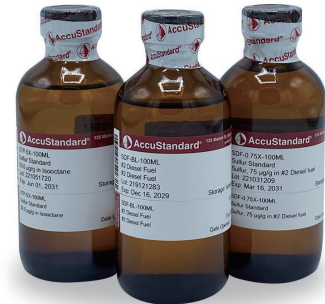

Petro(석유화학)

Sulfur / Nitrogen 제품군
TPH (CAT no: DRH-FTRPH)
Total Petroleum Hydrocarbon



Pesticide(잔류농약)

ASTM Methods (물 속 살충제 측정)
EPA Methods
Pesticides in Cannabis
Carbamates
Organophosphates
Triazines and Triazinones
Neonicotinoids and Fipronils



주문제작

보유 중인 12,000개가 넘는 제품에 포함되지 않은 CRM이 필요하세요?
AccuStandard는 요구 사항을 충족하는 맞춤형 표준을 제조합니다.
★ 수량, 크기, 용매 및 농도와 추가 요청사항을 기재해서 알려주세요!

ISO 17034 • ISO/IEC 17025 • ISO 9001

ERA는 1977년 설립된 CRM 및 국제 숙련도 제공 업체로서, 1991년부터 국제 숙련도를 제공 하기 시작하였습니다. 국제 숙련도 시험(Proficiency Testing, PT)은 분석능력의 향상, 측정 분석 결과의 신뢰성 향상 및 세부적인 실험 오차의 원인을 파악하기 위하여 전 세계 분석기관 에서 참여를 진행하고 있습니다.

국제숙련도 시험 항목

수질(Water Pollution, WP) 항목

먹는 물(Water Supply, WS) 항목

수질 및 먹는 물 미생물 항목

토양(Soil) 항목

대기(Air & Emission) 항목

국제 숙련도 참가 대상기관

- 국립환경과학원의 숙련도 검사를 받는 민간기관 등
- 내부숙련도 진행을 통해 직원의 분석능력을 유지하고자 하는 시험 검사기관
- [환경분야 시험.검사 등에 관한 법률] 시행령 제13조2(시험.검사기관 등)에 규정된 시험 검사기관

국제 숙련도 참가 목적

- 분석능력 향상 및 제3자의 의한 분석능력평가
- 측정분석 결과의 신뢰성 향상
- 세부적인 실험 오차의 원인 파악 및 개선 가능
- 내부정도관리 진행을 통한 분석능력 유지
- KOLAS 인증을 받으려는 시험기관
- 국제표준화기구(ISO guide 43) 기준에 맞는 국가정도관리 진행
- ERA 국제숙련도 참가 후 국립환경과학원의 숙련도(정도관리) 면제신청

제21조(숙련도 시험의 면제)

- 과학원장은 규칙 제14조에 따라 등록한 측정대행업소, 제15조제1항에 따라 측정대행항목을 변경하려는 자 및 규칙 제17조의4에 따라 정도관리를 재신청한 자에 대하여 제18조 제1항에 따른 정기 숙련도 시험을 적합 확인서를 발급받은 날로부터 1년 이내에 실시할 경우 해당분야 정기 숙련도 시험을 면제할 수 있다.
- 과학원장은 영 제13조의2제1항 각 호에 규정된 시험·검사기관이 ISO/IEC 17043 규정을 준수하는 숙련도시험에 참여하여 Z값의 절대값이 0 이하 의 판정을 받은 실적이 있는 항목에 대하여는 대상기관이 당해연도 말까지 그 결과 사본을 제출하는 경우, 익년도에 실시하는 제18조제1항의 정기 숙련도 시험을 면제할 수 있다. ¹⁾

¹⁾환경시험.검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정 [시행 2023. 12. 14][국립환경과학원고시 제2023-76호, 2023. 12. 14, 일부개정]

국제 숙련도 관련 법적 근거

- 숙련도시험 수행방법 및 추진일정 [환경시험 검사기관 정도관리 운영 등에 관한 규정] 제 14조에 따름
- 숙련도시험 결과 평가방법 및 기준 [환경분야 시험.검사 등에 관한 법률 시행규칙](별표 11의2)의 평가기준에 따름

ERA 인증

구분	인증	인증년도
Quality System	ISO 9001	1993
PT(국제숙련도) 제공	NIST NVLAP	1999
	ISO/IEC 17043	2002
CRM 제공	ISO 17034	2008
실험실 관련 분야	NIST NVLAP	1999
	ISO/IEC 17025	2008

ERA 제품 안내

분류	상세
CRM (인증표준물질)	· 기지시료(Known Sample) · 숙련도 시험 이전 모의 테스트 진행 · 분석물질 관련 원하는 농도 선택 가능
PT (국제숙련도)	· 미지시료(Known Sample) · PT 일정 내에만 진행 가능 · PT 참가자의 제출 값에 따른 상대평가 · 결과 Report 및 Certificate 제공
QR (Quick Response)	· 미지시료(Known Sample) · PT 일정 내에만 진행 가능 · *고객이 원하는 날짜에 주문 및 참가 가능 · ERA 자체 database에 의한 결과값 평가 · 결과 Report 제공



USP는 안전하고 양질의 의약품 공급에 대한 신뢰를 구축하는 데 중점을 둔 독립적인 과학적 비영리 기관입니다. 의약품 및 건강 보조 식품 등 분야에 신뢰를 구축하기 위해 노력했으며, 엄격한 과학 및 공공 품질 기준을 설정하여 USP는 환자의 안전을 보호하고 건강을 개선하도록 돕습니다.

Category★

- Biologics
- Dietary Supplements and Herbal Medicines
- Dissolution
- Excipients
- Foods
- General Chapters
- Impurities (Related Compounds)
- US DEA Regulated Items
- Small Molecules



◀ Products & solutions

Featured Solutions

품질 보증 해결, 규제 예측성 향상, 제조업체가 고품질 의약품, 건강보조식품, 식품을 유통하는 데 도움이 되는 USP 솔루션 포트폴리오에 대해 알아보세요.

USP 공식 참조 표준

의약품 공급 지도

제약 분석 불순물



EDQM은 양질의 의약품에 대한 책임이 있는 품질 표준을 정교하게 만드는 책임이 있는 유럽 평의회의이사국(DGIII)으로, EDQM은 수혈, 장기, 세포 및 조직 이식, 소비자 건강 분야의 지침과 표준을 개발합니다.

유럽 의약품 및 의료 품질 관리국

카탈로그에는 유럽 약전 모노그래프에 규정된 용도에 공식적으로 유효한 모든 기준 표준이 나열되어 있습니다. 하단 QR을 이용하여 확인하세요! (매일 업데이트)

Ph. Eur. RS

WHO ISA

WHO ICRS

Reference Standards ▶



클린룸 제품 및 안전용품

Steel Use Stainless

GMO, GMP 규제에 맞는 최고의 품질과 경쟁력 있는 가격으로 제공



Cleanroom Furniture

클린룸가구

모든 품목을 SUS304 재질로 제작, 녹이나 파티클이 발생하지 않아 cleanroom 사용에 이상적입니다. 선반 등은 보강처리를 통하여 무거운 하중에도 견딜 수 있는 내구성을 자랑합니다.

Material

SUS 304, SUS 316L

싱크대

작업대

의자

옷장 및 신발장

Stainless Steel Container

스테인레스 드럼 및 돌리

stainless Steel Container 스테인레스 재질로 우수한 내구성 및 내부식성을 지녀 반영구적으로 사용이 가능한 위생용기이며, 용기 내부에 틈이 없어 이물질이 끼거나, 미생물 번식의 우려가 전혀 없습니다.

Material

SUS 304, SUS 316L

Hopper Container with Legs

Slope Container

Dolly

Stainless Steel Equipment

스테인레스 비품

원료 칭량 시 사용하는 스테인레스 재질로 된 스크프 뿐만 아니라, 비이커, 국자, 쓰레기통 및 손소독기 등 cleanroom에서 사용하기 적합한 비품들로 구성되어있습니다.

Material

SUS 304, SUS 316L

비이커

국자

페달식 휴지통

스크프

*상단 이미지 제품 외에도 많은 제품이 있습니다

SAFETY SUPPLIES

엘티솔루션은 종합안전 솔루션을 제공합니다. 국내 최초 개발 및 제작 제품 Cleanroom MOP 뿐만 아니라 방진복, 글러브, 안전 캐비닛 등 안전에 필요한 모든 제품을 취급합니다.

클린룸 제품 및 안전용품

방진복



청소포



안전 캐비닛



소방포



안전 깔대기



시약 운반용



글러브



유출방지흡착포




트레이




ECMtech Co.,Ltd 는 미국, 독일 등 해외유명업체의 cleanroom mop 개발, 생산, 공급을 했던 20년 이상의 축적된 경험과 기술을 가진 전문가들의 합작으로 2022년 설립된 cleanroom mop 개발, 생산전문 국내기업입니다.

AZENMOP RS40

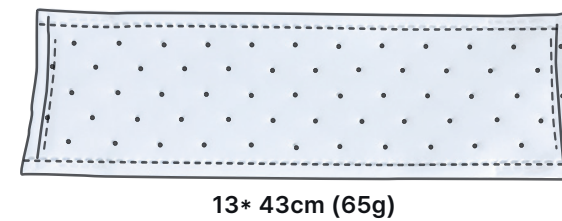

AZENMOP DS40

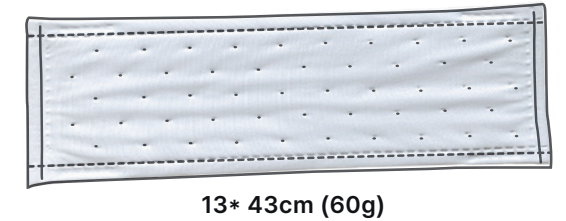

Premium
pocket mop

100% polyester
microfiber material

High liquid
absorbency

PK type mopping face
for removing
hard surface contamination

- CR wiper mopping face for even liquid application
- High liquid absorbency
- Non-sterile mop for GMP C, D
- Sterile mop for GMP A/B,C,D
- Packing: 5 mops/bag, 20bags/CT (100 pcs/CT)

- 40cm pocket mop
- 100% polyester microfiber material
- Non-sterile mop for GMP C, D
- Sterile mop for GMP A/B,C,D
- Packing: 5mops/bag, 20bags/CT (100pcs/CT)



Absorbency	330 % ↑
Fabric Color	White
Polybag	HDPE 0.1mm, double pack
Particle LPC	≥ 0.5um, ≤ 80,000 counts/cm2
Particle APC	≥ 0.5um, ≤ 50,000 counts/m3
Extractables	DIW ≤ 0.4mg/m2, IPA ≤ 0.5mg/m2

Application	Industries
Floor Wall Ceiling	Pharma Laboratory Electronics

검교정 서비스

ISO 8655 및 ISO 17025

Eppendorf Korea 가 국제공인 교정기관이 되었습니다.
피펫의 Calibration 및 ISO 17025 / KOLAS 교정은
물론 예방점검 까지 한번에 받아보세요!



Eppendorf Calibration Process

1. 오염물 제거 (Decontamination) > 2. 예방정비(Preventive Maintenance) 및 수리
> 3. Calibration 및 Adjustment > 4. 라벨링과 패키지

Pipette Calibration Service

Calibration Services (Basic Check)

3X4 4 per test volume*1 3포인트에서 4회 측정
Basic Check (유지보수 불포함)

3X4 4 per test volume*1 3포인트에서 4회 측정
Basic Check PM (유지보수 포함)

*교정성적서 제공가능

Calibration Services (KOLAS)

ISO 17025
KOLAS (유지보수 불포함)

ISO 17025
KOLAS PLUS (유지보수 포함)

Additional Services

ISO 17025 Calibration Certificate

전담 엔지니어 케어 서비스
입고일 기준 영업일 3-5일 내 서비스 완료

싱글 채널: (가격 문의) 멀티 채널: (가격 문의)
추가비용 발생

부가적인 서비스 비용

*이메일 문의

On-site calibration services in your own laboratory
피펫 방문 점검 서비스(수량에 따른 출장비용 발생)

모든 브랜드 피펫을 점검 및 교정

타브랜드 피펫도 수준 높은 서비스를 받아보세요!
방문점검 서비스를 실시합니다. 많은 신청 바랍니다.

자세히 살펴보기!



홈페이지



제약, 바이오, 의료, 환경 등 생명과학 분야에서 혁신적인 연구를 이끌어내는데 필요한 솔루션 및 최첨단 제품을 공급하는 글로벌 기업입니다. 국내외 다양한 협력사와의 파트너십을 통해 우수한 제품 및 서비스를 제공하고, 고객사의 연구 환경을 더 나은 방향으로 이끌어가는데 헌신합니다.

Portfolio 제품 분류



크로마토그래피

기체 및 액체 크로마토그래피의 시료 전처리, 분리 및 질량분석기 등과의 완벽한 기기 결합 및 분석 소모품 제공 분석, 성능, 생산성, 사용 편의성에 적합한 워크플로우 솔루션 제공



이미징 장비

물질의 형태, 크기 등을 관찰할 수 있는 입형에 서부터 단백질, DNA 등 정확하고 신속하게 관찰 할 수 있는 분야별 장비 및 소프트웨어 제공



실험실 기초 장비

국립연구기관, 기업연구소 및 대학실험실에 세계 유수의 기초 실험/분석 장비를 제공하여 실험실 효율성 및 생산성 향상 지원



실험실 설계 서비스

고객의 실험실 공간과 연구 요구에 맞춘 최적의 레이아웃 설계 경험 많은 전문가가 직접 설치하여 안전하고 효율적인 작업 환경을 보장



생명과학 장비

실험 결과에 대한 안정성 및 정확성 확보를 위해 세포, 단백질 및 유전체 연구에 필요한 다양한 장비를 제공하여 신뢰성 높은 결과를 얻을 수 있도록 지원



연구용 소모품 및 시약

Merck sigma, Thermo Fisher, corning 등 업계를 선도하는 제조사에서 다양한 종류의 고품질 연구용 소모품 및 시약 제공

Special Service

판매의 끝이 아닌, 상품정보 및 구매 패턴 분석을 통한 재고관리, 각종 문서 지원, 사후 관리 서비스를 제공 합니다.




무상 점검 서비스



워런티 제공



대여.데모 지원

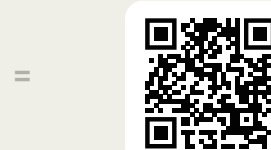

서비스 신청 QR

고객센터 운영 시간은 평일 오전 9:00 ~ 18:00 입니다.

토요일, 일요일, 공휴일은 휴무입니다.

점심시간은 오후 12:00 ~ 오후 13:00 입니다.

T) 033-255-0005

E) LTS@ltsol.co.kr

